
單元14: 自行設定 VI


主題:

- A. 如何設定人機介面的外觀
- B. 如何在VI 執行之時開啟subVI 的人機介面
- C. 如何使用及指定鍵盤捷徑鍵
- D. 如何使用自定的VI 屬性來編輯VI
- E. 如何自訂面板檢視(選擇性內容)

設定VI的特性

- ■在建立VI 之後,你可以設定人機介面的外觀,讓使用者得以輕鬆地操作VI
- ■設定方式
 - □在工具列: File VI»Properties
 - □在VI圖示上,按滑鼠右鍵,選「 VI Properties 」

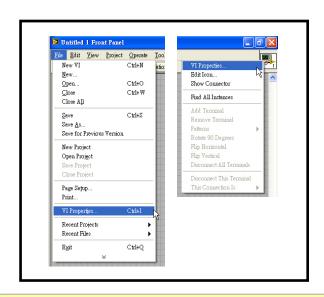

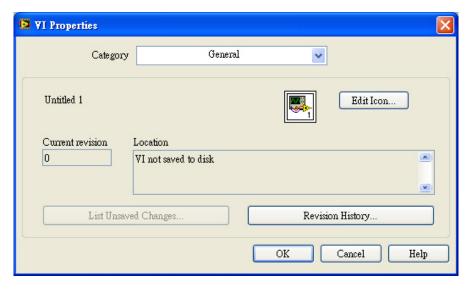

秘訣: 熱鍵<Ctrl + i>


視窗外觀

■設定VI執行時的視窗外觀

🛂 VI Properties	X
Category	Window Appearance
Window title Untitled 1	✓ Same as VI name
 Top-level application window Dialog Default Custom Customize	File Edit Operate Tools 100 00 100 00 100 100 100 100
	OK Cancel Help


視窗大小


- 1. 設定最小的視窗尺寸(寬、高像素)
- 2. 自動調整人機介面視窗的大小,使之配合螢幕大小
- 3. 在使用不同解析度的 電腦上開啟VI時,改 變VI的大小,使它佔 用大約同樣比例的螢 幕空間

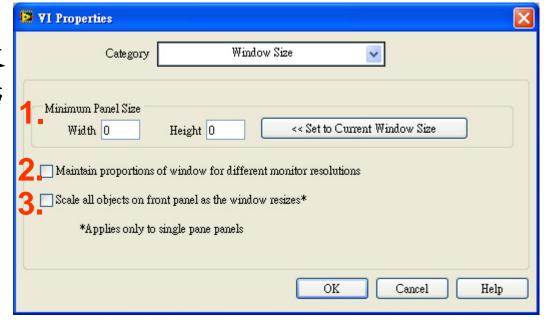

建立一個彈出視窗

- ■在Window Appearance設定為對話框(Dialog)
- ■在Window Appearance的Customize進行細部設定

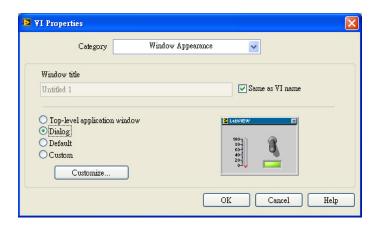


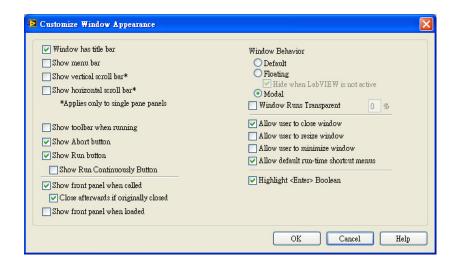



1

經驗:我比較喜歡使用 Dialog的設定方式

在VI執行時開啟SubVI的人機介面

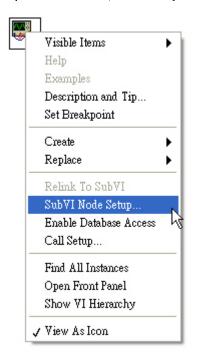

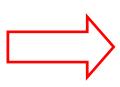

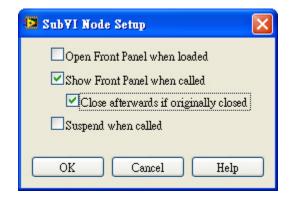


- ■Open Front Panel when loaded— 當subVI 載入,或當呼叫它的VI載入之時,顯示人機介面。
- ■Show Front Panel when called— 在subVI 被呼叫時,顯示人機介面。
- ■Close afterwards if originally closed—如果Show Front Panel when called 也被勾選,而且如果subVI 先被關閉,則在subVI 執行之後關閉人機介面。
- ■Suspend when called—在subVI 被呼叫時停滯不動,等候使用者的互動。這個選項和選擇Operate»Suspend when called 的效果一樣。


練習14.1 - 製作對話框

- 在VI執行時,顯示一個subVI的人機介面
 - 1.在主程式做一個按鈕,當按下按鈕時,叫出一個subVI,subVI顯示目前的時間。
 - 2.在主程式要使用Event Structure

鍵盤捷徑Key Navigation

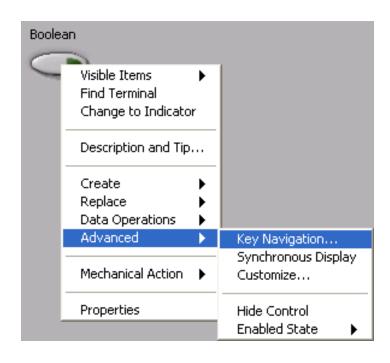

設定人機介面元件的鍵盤捷徑

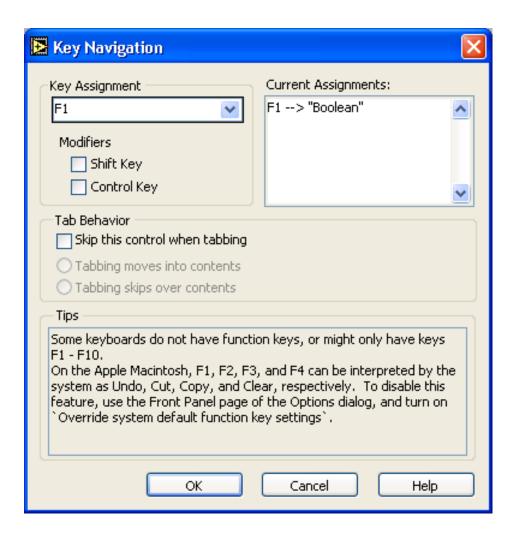

練習14.2 - 設計鍵盤捷徑

■開啟練習14.1所製作的MainVI,為MainVI的按鈕加上鍵盤捷徑

練習14.3 - 編輯一個難以編輯的VI

- ■開啟檔案:「<CD>\Ch14\Edit Me.vi」
- ■嘗試停止此VI
- ■按下「Start」按鈕,經過10秒,程式停止, 便可以進行程式編輯了

本章重點回顧

- ■選擇File»VI Properties,即可設定VI 的外觀和行為。你也可以在人機介面或程式區的VI 圖示上按滑鼠右鍵,並從捷徑選單中選擇VI Properties來進行設定。
- ■如果你希望在呼叫subVI 時,讓subVI 開啟一次人機介面,請在subVI 上按滑鼠右鍵,並從捷徑選單中選擇SubVI Node Setup,以顯示SubVI Node Setup 對話方塊。勾選Show Front Panel when called 以及Close afterwards if originally closed 查核方塊。
- ■如果你希望呼叫subVI 時,subVI 都會開啟其人機介面,請選擇File»VI Properties。從Category 下拉選單中選擇Window Appearance,點選Customize 按鈕,並勾選Show Front Panel When Called 及Close Afterwards if Originally Closed 查核方塊。
- ■要指定鍵盤捷徑鍵給控制器,請在控制器上按滑鼠右鍵,並從捷徑選單中選擇Advanced»Key Navigation。
- ■在改變VI屬性之前,先儲存VI的備份至新的位置(選擇File»Save with Options),以免造成VI難以編輯。